




# WebViewer Bedienelemente und Beispiele

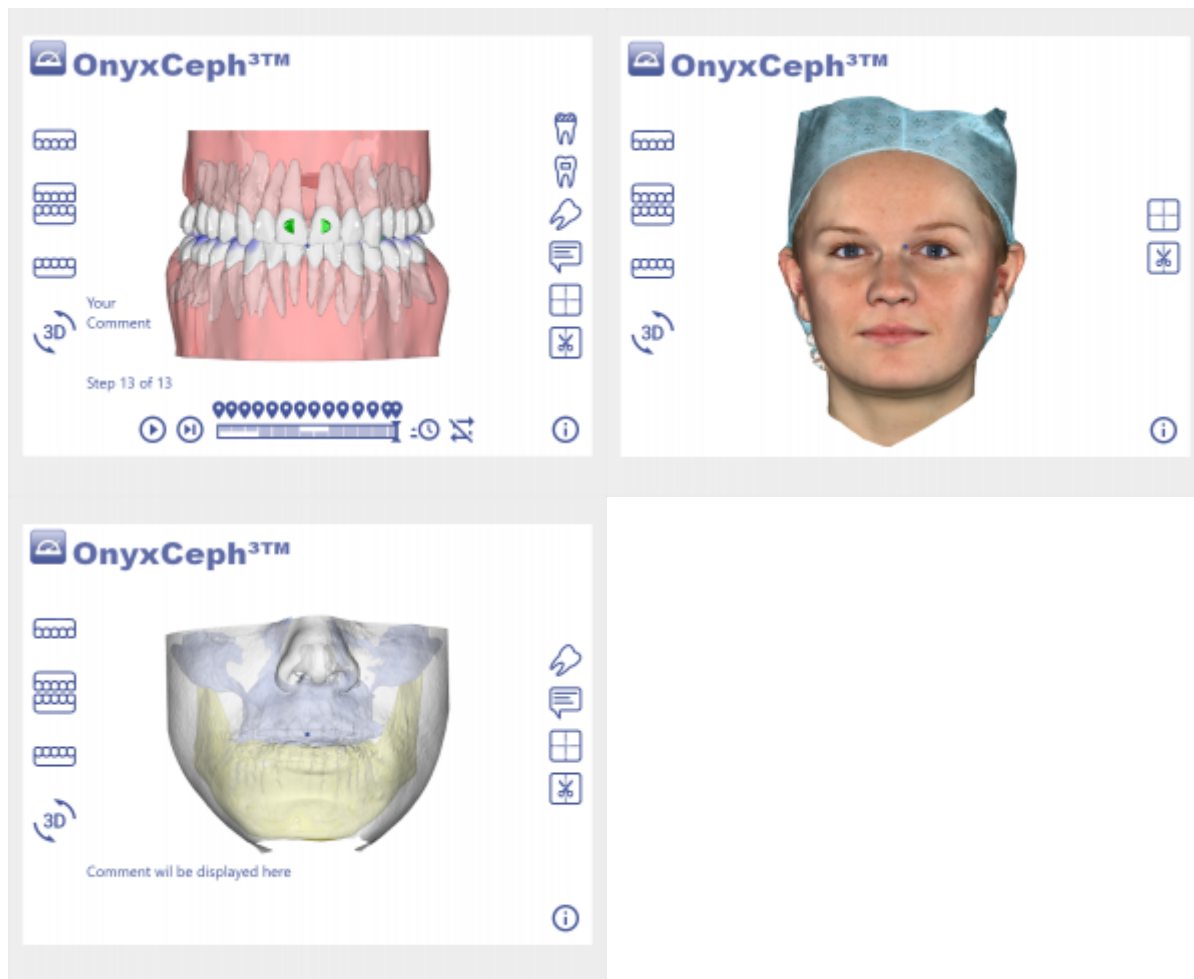


Webview Beispiel Aligner-Planungsziel



Webview Beispiel Facescan



Webview Beispiel Headscan



Icon	Auswahl / Ausrichtung	Icon	Animation
	Anzeige Objektgruppe oben mit Ansicht von unten		Animation starten
	Anzeige gesamtes Objekt mit Ansicht von vorn		Animation stoppen
	Anzeige Objektgrupp unten mit Ansicht von oben		Animation bis zu nächsten Step abspielen
	Rotieren der Ansichten von vorn-rechts-hinten-links-unten-oben	<b>Icon</b>	<b>Geschwindigkeit</b>
<b>Icon</b>	<b>Darstellung</b>		Animation langsam abspielen
	Anzeige Vertexfarben: an / aus		Animation schneller abspielen
	Anzeige Attachments: aus / transparent / an		Animation schnell abspielen
	Anzeige Malokklusion: aus / transparent / an	<b>Icon</b>	<b>Loop</b>
	Anzeige: Stepname / Stepname + Kommentar / aus		Animation nach Abspielen wiederholen
	Anzeige Ruler: an / aus		Animation nach Abspielen stoppen
	Schneiden längs Y: aus / rechts / links	<b>Icon</b>	<b>Info</b>
			Zugehörige Patienteninformationen zum Fall anzeigen

**Zeitleiste**

Steps 1-3 nur OK - Steps 4-6 OK/UK - Steps 7-8 nur UK - Steps 9-13 OK/UK

## Verweise



From:

<https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:

[https://onyxwiki.net/doku.php?id=3d\\_viewn](https://onyxwiki.net/doku.php?id=3d_viewn)

Last update: **2023/03/02 15:47**

