

# Case Approval


Soll eine beim Dienstleister durchgeführte Fallplanung von einem Kieferorthopäden oder Zahntechniker an einem anderen Standort gegengeprüft / freigegeben werden, dann kann das je nach dort vorhandener OnyxCeph<sup>3</sup>™ Programmversion entweder unter Verwendung des Planungsmoduls selbst oder mit Modul [Approval 3D](#) erfolgen.

## Verwendung Planungsmodul

Soll die Prüfung und Freigabe der Planung unter Verwendung des eigentlichen Planungsmoduls (z.B. Modul [Aligner 3D](#)) vorgenommen werden, dann ist auf Seiten des Prüfers minimal Programmversion OnyxCeph<sup>3</sup>™ 3D PRO mit dem betreffenden Planungsmodul erforderlich.

In diesem Fall wird der für die Planung benutzte [Eltern](#)-Befund mit gespeichertem Planungsprojekt per Container-Exchange zwischen Dienstleister und Prüfer ausgetauscht.

Die vom Prüfer als separates Projekt am selben Befund gespeicherten Modifikationen / Änderungswünsche können vom Labor entweder direkt akzeptiert oder teilweise in die ursprüngliche Planung eingearbeitet werden.

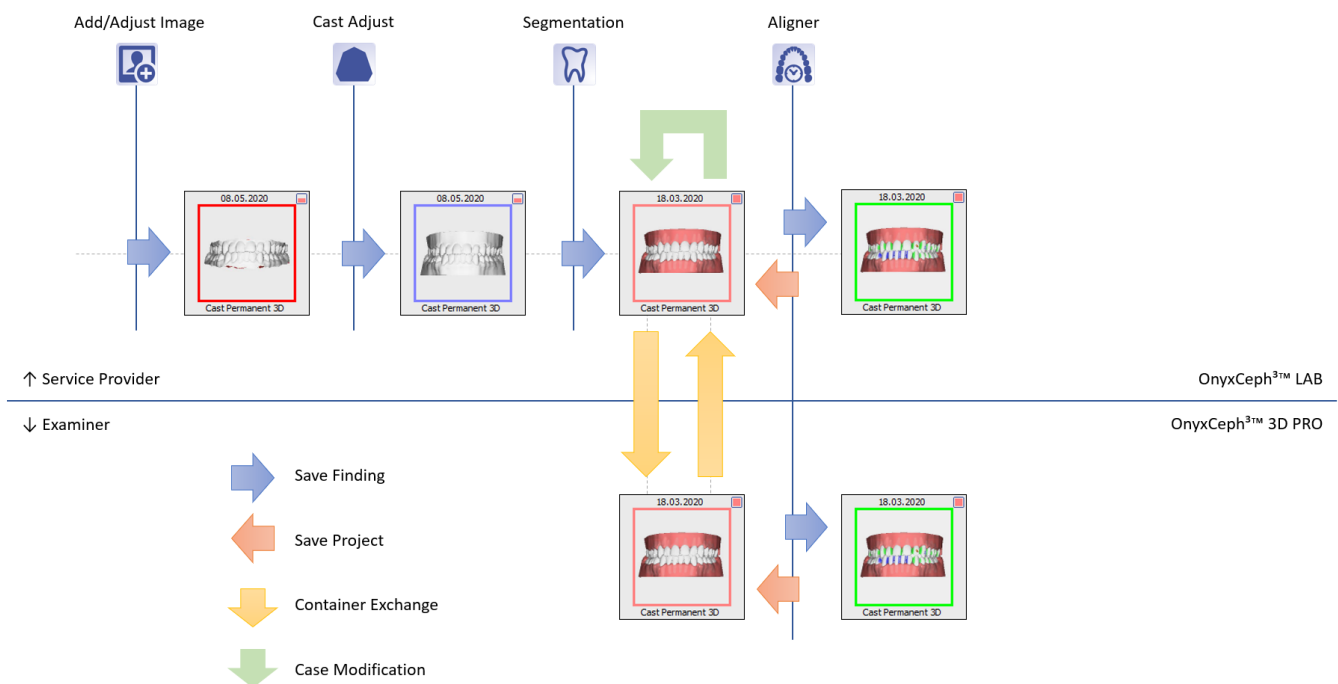



## Verwendung Approval 3D Modul

Soll die Prüfung und Freigabe der Planung unter Verwendung des Moduls [Approval 3D](#) erfolgen, dann ist auf Seiten des Prüfers lediglich Programmversion OnyxCeph<sup>3</sup>™ BASIC erforderlich.

In diesem Fall wird vom Dienstleister der aus dem Planungsmodul exportierte [Kind](#)-Befund (das Planungsergebnis) per Container-Exchange vom Dienstleister an den Prüfer geschickt. Dieser öffnet den erhaltenen Befund mit Modul Approval 3D, nimmt ggfls. Änderungen vor und speichert aus dem Modul heraus einen neuen Approval-Befund mit seinen Änderungen ab. Diesen Befund sendet er per Container-Exchange an den Dienstleister zurück.

Die vom Prüfer im Approval-Befund gespeicherten Modifikationen / Änderungswünsche können vom Labor ebenfalls im Approval-Modul oder auch im Vollbild geöffnet und komplett oder teilweise in die ursprüngliche Planung eingearbeitet werden.

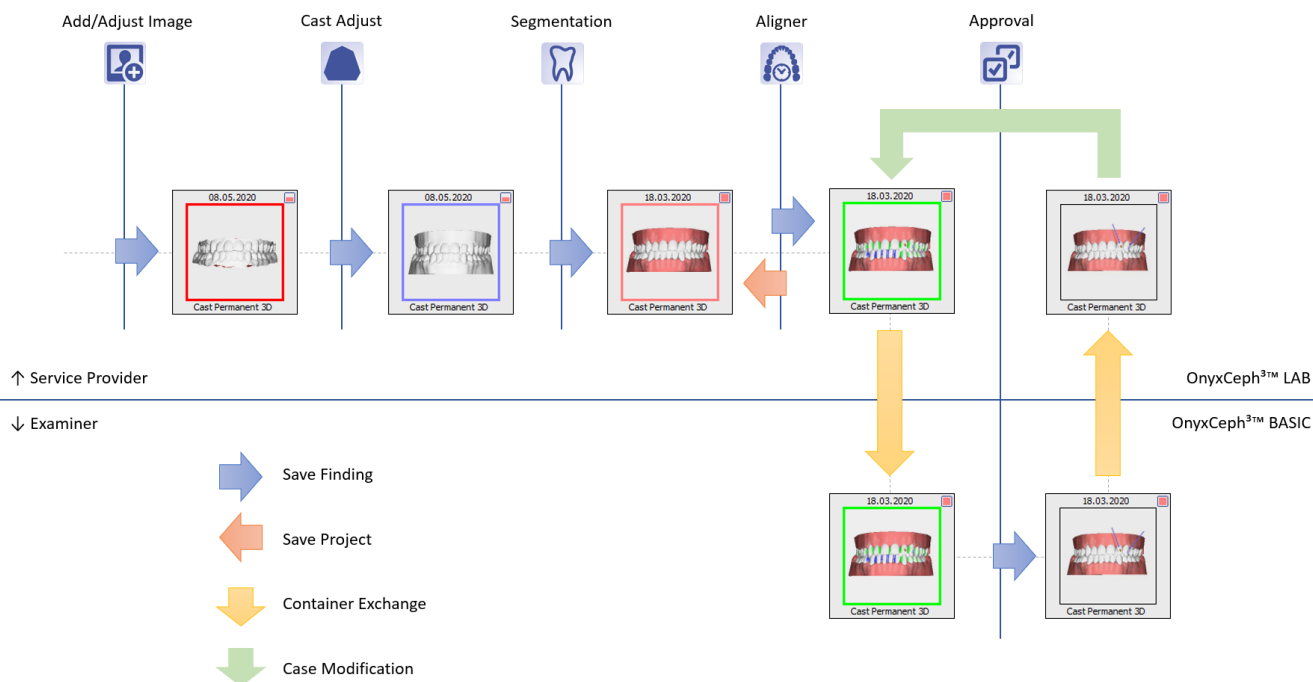

 [Originalbefund - abgeleiteter Befund](http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=case_approval)

From:

<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph3™ Wiki]

Permanent link:

[http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=case\\_approval](http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=case_approval)

Last update: **2021/12/15 08:02**

