


Schnittstellenkonfiguration Digitalröntgen: DBSwin



Parameter	Einstellung
[Unterstützung aktiv]	Aktivierung der Importtaste im Modul Bild hinzufügen 2D
Programmpfad [...]	Lokaler Pfad zur ausführbaren Datei ..\DBSwin.exe
[Vorschaubilder anzeigen]	Aktivierung Thumbnail-Vorschau im Vorschaufenster Modul Bild hinzufügen 2D
[Glättung]	Verbesserung der Anzeige hochauflöster Bilder durch Resampling
[Test]	Test Datenbankzugriff
Übergabedatei [...]	Stammdatenübergabe mit Aufruf über Kommunikationsdatei]

Verweise

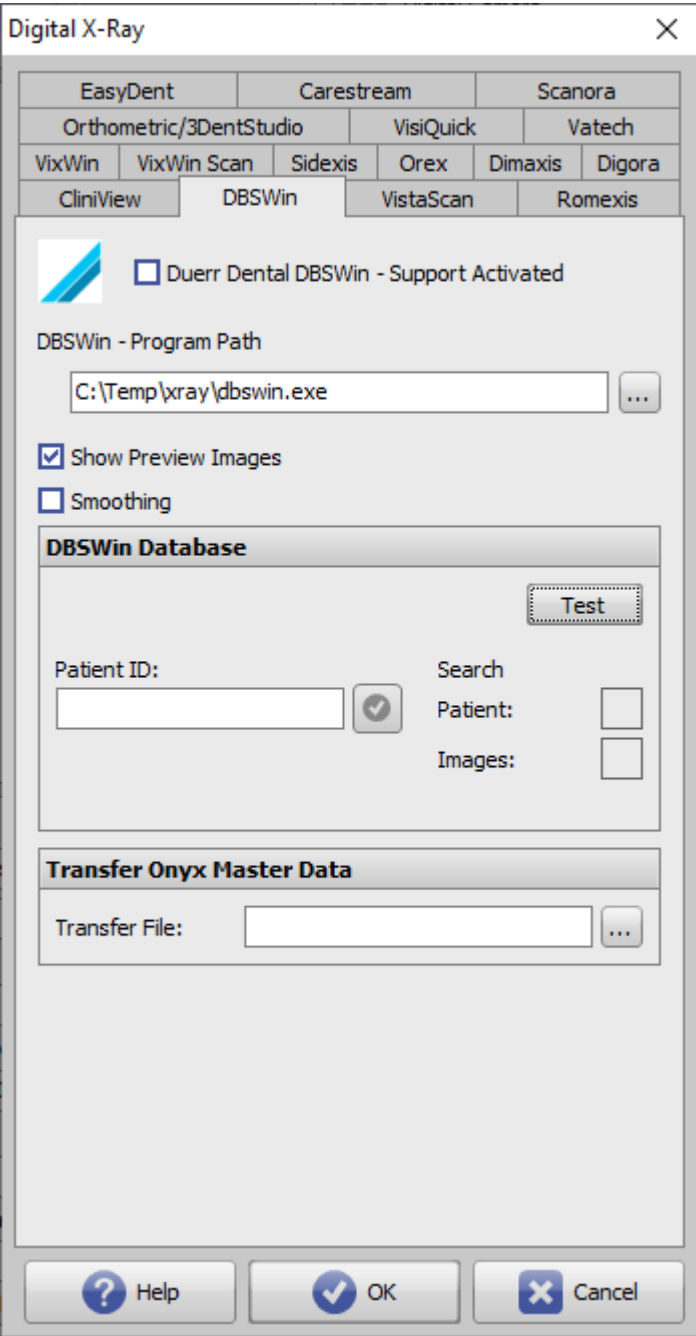

https://www.image-instruments.de/Onyx3/Bildimport_OnyxCeph3_aus_DBSWin.pdf

From:

<https://www.onyxwiki.net/> - **[OnyxCeph³™ Wiki]**

Permanent link:

<https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=dbswin>

Last update: **2022/06/27 07:33**

