





Icon-Tasten [Projekt laden] | [Projekt speichern]

Icon	Funktion
	Projekt laden
	Projekt speichern

Die Icon-Taste [Projekt laden] ruft einen Laden-Dialog für Onyx-interne Projekte auf, die zuvor zum aktuellen Datensatz gespeichert wurden. Projekte beinhalten weitgehend alle Parameter und Informationen, um den gespeicherten Bearbeitungsstand im jeweiligen Bearbeitungsmodul wiederherzustellen.

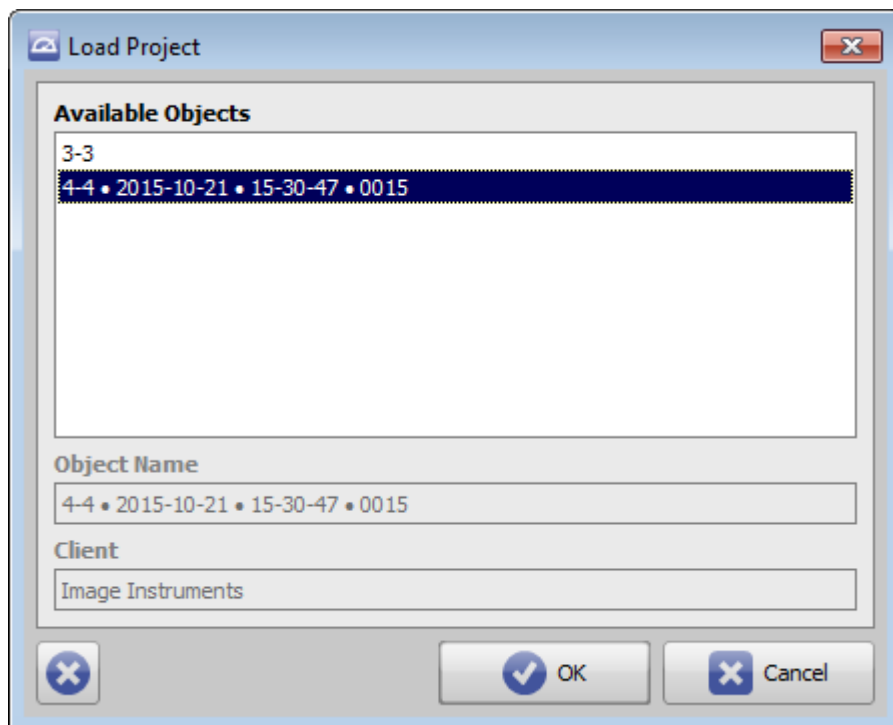

Die Icon-Taste [Projekt speichern] ruft eine Speicher-Dialog für Onyx-interne Projekte auf.

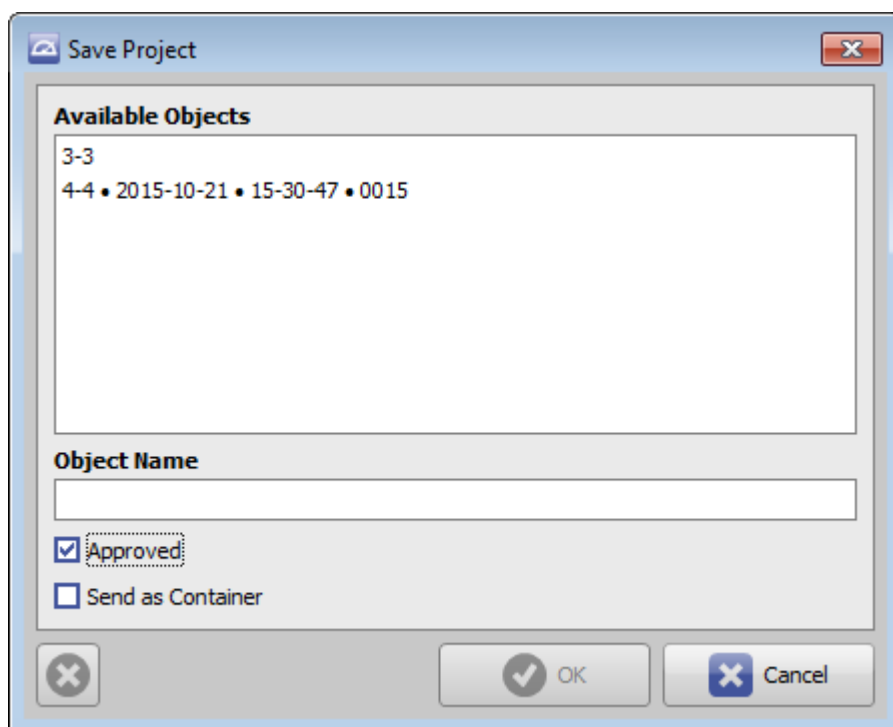


Der Name, unter dem ein Projekt gespeichert werden soll, kann frei vergeben werden. Wird Checkbox [Approved] aktiviert, so wird der gewählten Name mit den Angaben Datum, Uhrzeit und Clientnummer des Erstellens vervollständigt:

Projekt_Name • YYYY-MM-DD • hh-mm-ss • ClientID

In der Projektliste ausgewählte Einträge können mit Taste [Löschen] gelöscht werden. Projekte mit Attribut *Approved* können nur vom erstellenden Client gelöscht werden. Wurde ein bestätigtes Projekt per Container-Exchange von einem Drittclient importiert (z.B. von einem Überweiser, Dentallabor o.a.), ist ein Löschen nicht möglich.

Projekte können zusammen mit dem zugehörigen Datensatz direkt aus dem Speicher-Dialog per Container online versandt werden. Hierzu muss Checkbox [Als Container senden] aktiviert werden, bevor mit der [OK]-Taste bestätigt wird.

Gespeicherte Projekte werden unter dem zugehörige Modul im Dokumentenbaum auf Reiter [Patient] angezeigt und können von dort aus im Modul geöffnet werden. Alternativ kann über das Kontextmenü des Dokumentenbaum-Eintrages der zugehörige Befund auf Reiter [Bilder] ausgewählt werden (→ [#3496](#)).

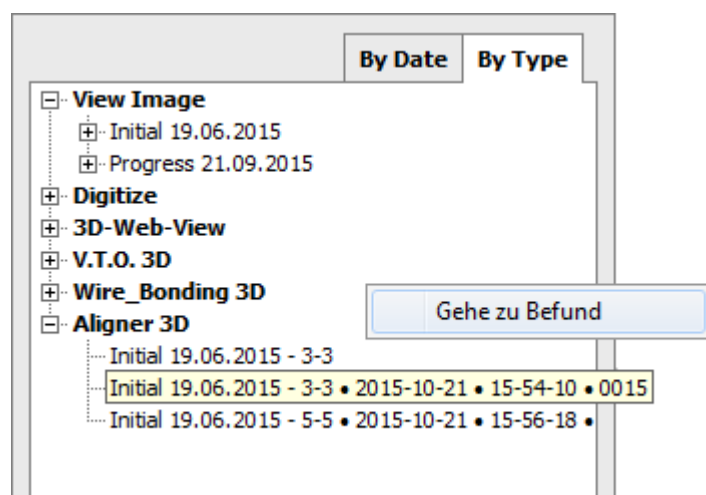

From:

<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

http://onyxwiki.net/doku.php?id=ic_006

Last update: **2015/10/21 16:20**

