

Scan Import iTero


Einstellungen iTero

1. Melden Sie sich im Portal [MyiTero](#) an
2. Klicken Sie auf Icon-Taste [Einstellungen] oben rechts
3. Klicken Sie auf das [Export Einstellungen] Icon im Panel Anwendereinstellungen
4. Wählen Sie folgende Optionen aus der Auswahlliste

Export Type iCast	= Open Shell
Export Type iRecord	= Open Shell
Data Format	= File per Arch (arches oriented in occlusion)
File Type	= STL (no color) or PLY (color)

Einstellungen OnyxCeph³™

1. Öffnen Sie Hauptmenü Options[Systemoptionen auf [Reiter |Schnittstellen|](#)
2. Im Panel [Import](#), auf Taste [\[Modell - i/o Scanner\]](#) klicken
3. Reiter [|iTero|](#) öffnen
4. Importverzeichnis auswählen
5. Offsetwerte für Rotationskorrektur eintragen (wenn erforderlich)
6. Checkbox [iTero - Unterstützung aktiv] aktivieren

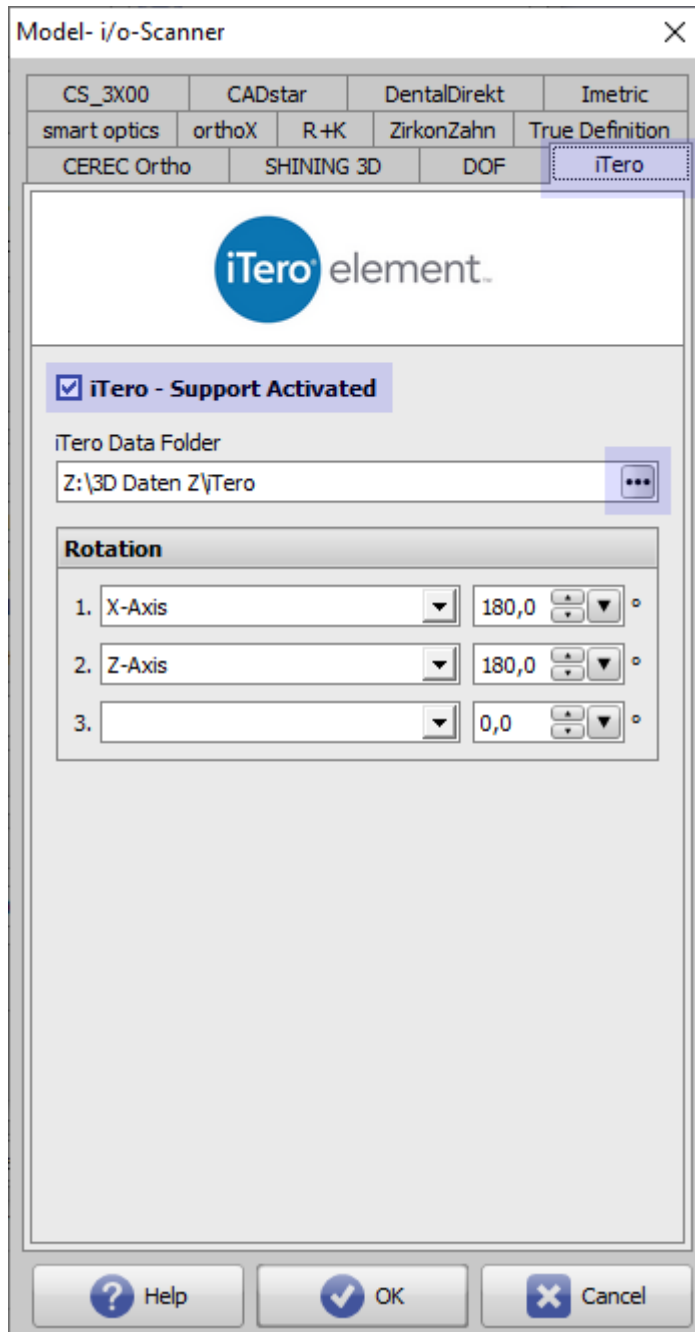

Workflow iTero Scan Export

1. Melden Sie sich im Portal [MyiTero](#) an
2. Auswahl Patient | Fall | Scan
3. Taste [Export] klicken
4. iTero Importverzeichnis wählen und (ZIP) Download starten

Patients · My iTero

bff.cloud.myitero.com/doctors/patients

Apps KFO Invisalign Doctor Si... Login · My iTero InformaDent

Patienten

Patienten suchen

Name ▲	Fallnummer	Datum des letzten Scans
Doe, John		05/07/2018


Bestellungen

Auftragsnummer ▼	Scandatum	Fallart	Status
19191846	05/07/2018	Invisalign + iRecord	Abgeschlossen

Auftrag anzeigen Fallart ändern Viewer Exportieren Invisalign Ergebnissimulator


Workflow OnyxCeph³™ Scan Import

1. Patient wählen
2. Modul [Bild hinzufügen 3D](#) öffnen
3. In Panel Quelle, Reiter |iTero| anwählen
4. Taste [Bilder abrufen] klicken
5. ZIP Archiv mit Doppelklick öffnen
6. Patientenname und Vorname kontrollieren
7. [Scan OK](#) und [UK](#) per [Drag&Drop](#) importieren

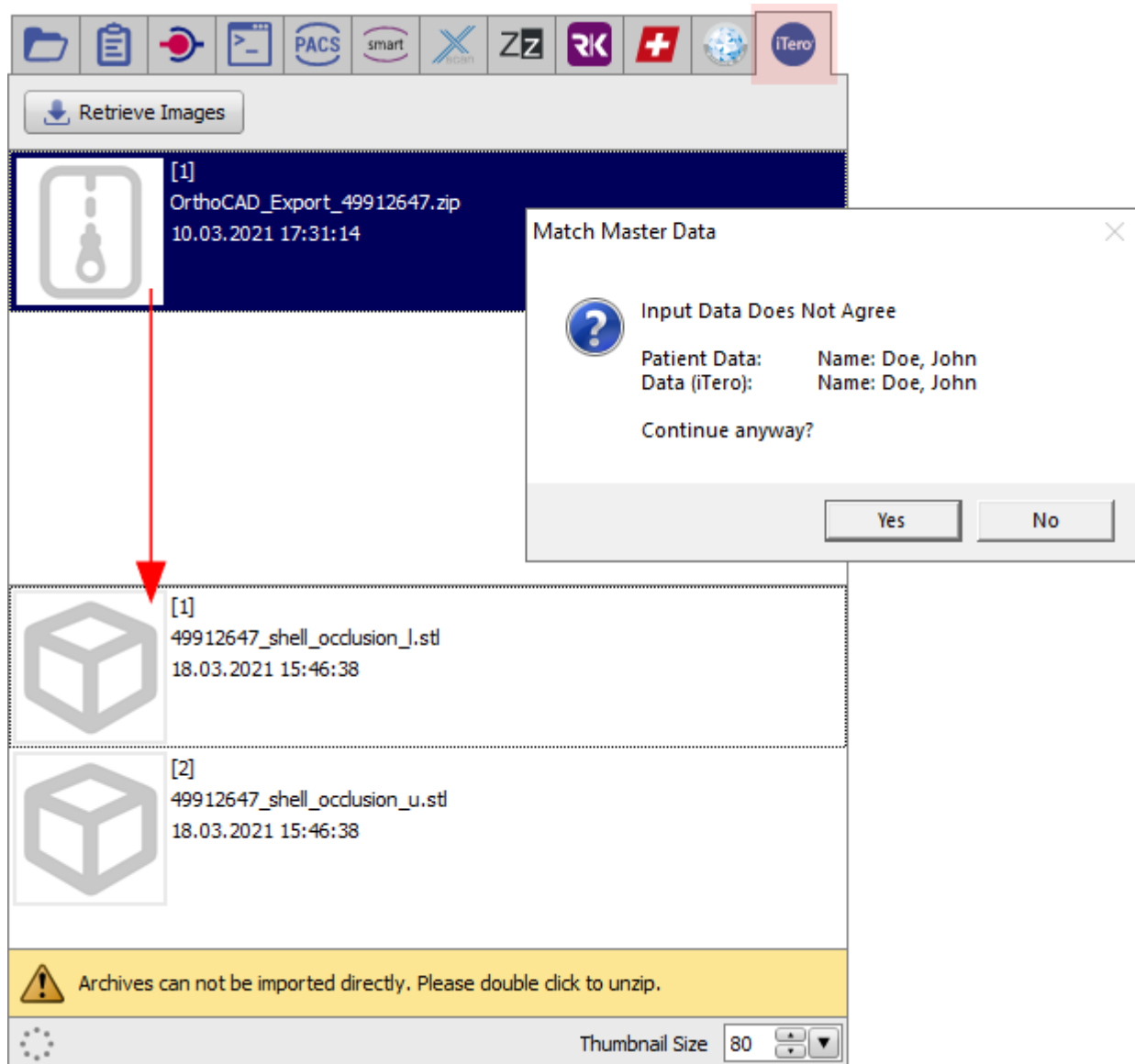

Optional: OnyxCeph³™ 2D-Bildimport

1. Modul [Bild hinzufügen 2D](#) öffnen
2. Modul [Bild hinzufügen 3D](#) öffnen
3. In Panel Quelle, Reiter |iTero| anwählen
4. Taste [Bilder abrufen] klicken
5. ZIP Archiv mit Doppelklick öffnen
6. Patientename und Vorname kontrollieren
7. [2D-Ansichten importieren](#)

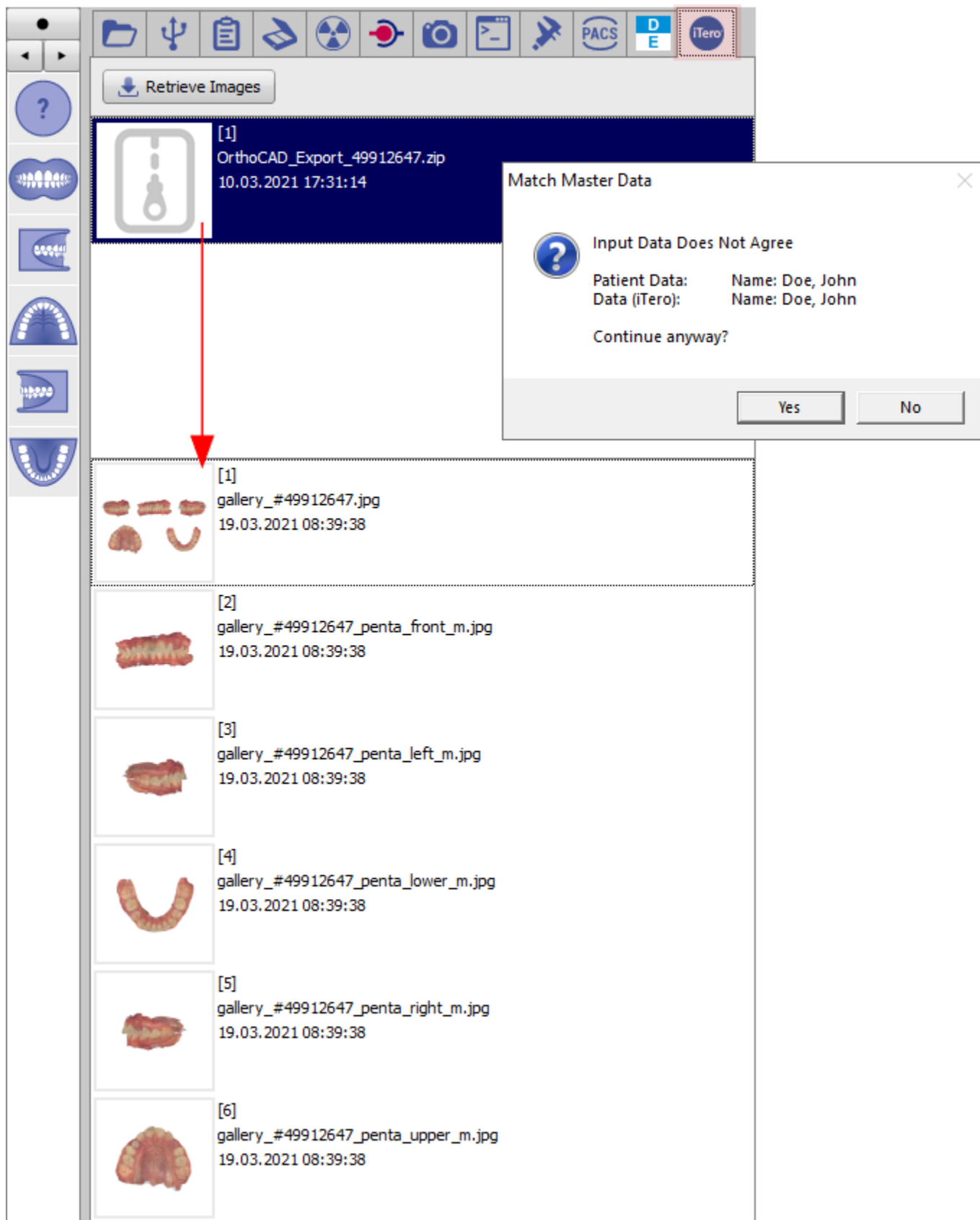

Verweise



From:

<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

<http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=iteroimport>

Last update: **2023/06/29 16:37**

