


Schnittstellenkonfiguration Digitalröntgen: EasyDent

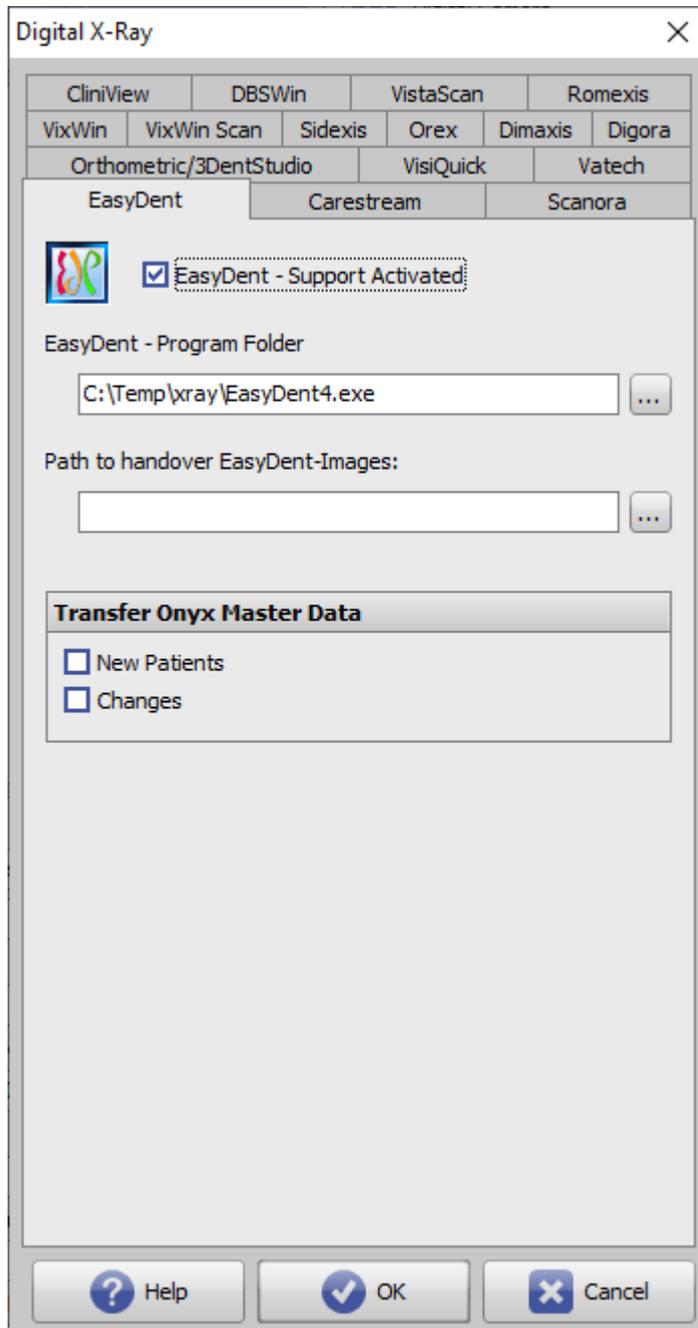

Parameter	Einstellung
[Unterstützung aktiv]	Aktivierung der Importtaste im Modul Bild hinzufügen 2D
Programmpfad [...]	Lokaler Pfad zur ausführbaren Datei ..\EasyDent4.exe
Bildübergabepfad [...]	Lokaler Pfad der EasyDent-Bildübergabe
[Neue Patienten]	Übergabe neuer Patientendaten bei Aufruf
[Änderungen]	Abgleich vorhandener Patientendaten bei Aufruf

From:
<https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
<https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=easydent>

Last update: **2022/06/27 07:34**

