


Klebeposition individualisieren

Weicht die individuelle Kronenkrümmung von der für die Programmierung der Bracketbasis verwendeten Zahnform ab, kann die Klebebasis über die Variation des Winkels zwischen Straight-Wire-Bogenebene und FACC **bei unverändertem Inzisalkantenabstand** (im Beispiel 5,04 mm) gegenüber der initialen "Best-Fit-Position" (grün) individualisiert werden.

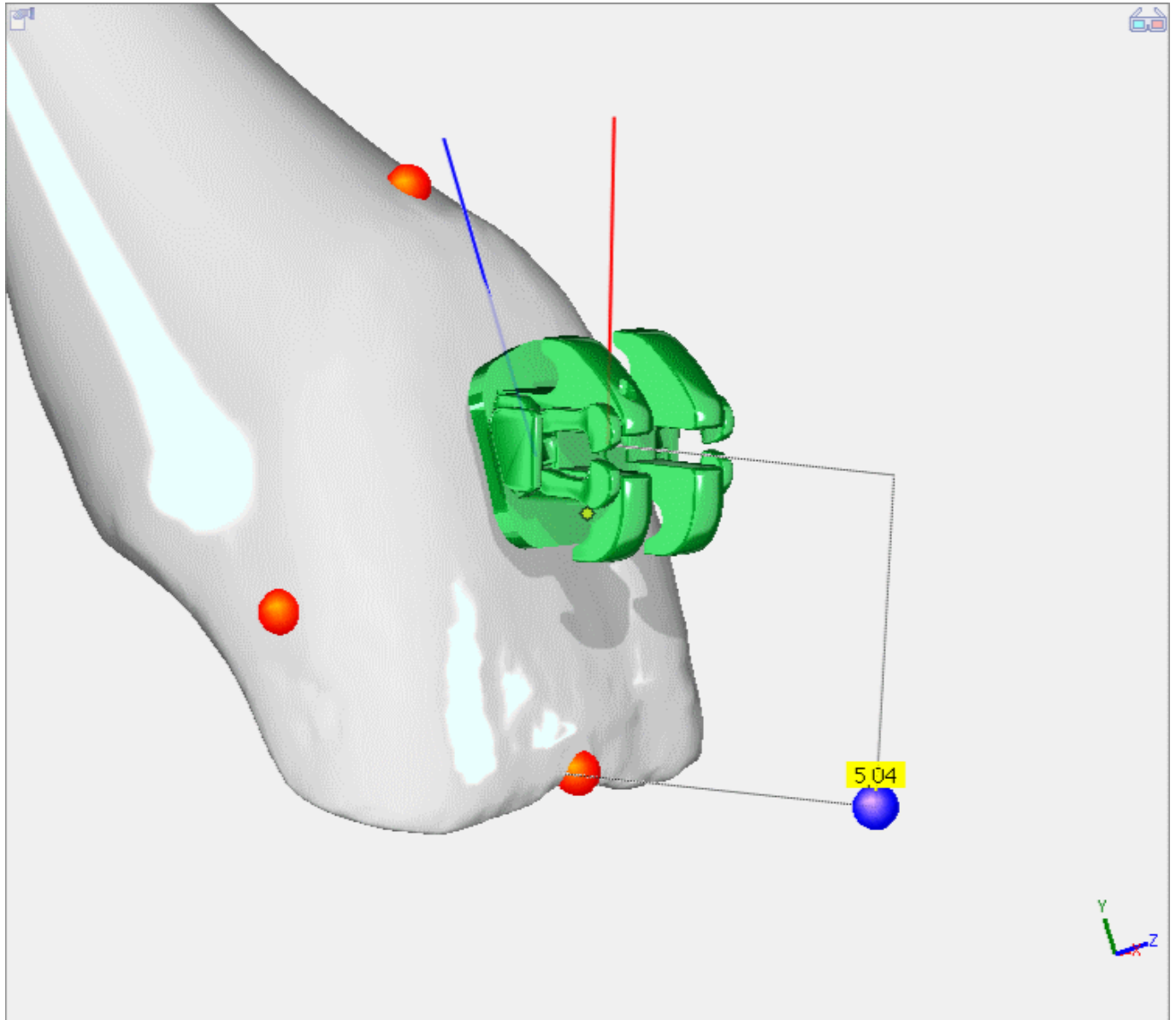

[zurück](#)

From:
<https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
https://onyxwiki.net/doku.php?id=fa_bl

Last update: **2023/10/30 08:04**



