

Eintrag TransformControl3D


Syntax

```
[Waefer]
OldAlignJaw=value   |   value = 0,1
```

```
[MountCast]
OldAlignJaw=value   |   value = 0,1
```

Beschreibung

Mit value=1 wird die "alte" Version der Kieferanpassung wieder aktiviert, die ab 3.2.83 durch ein vereinheitlichtes Konzept ersetzt wurde. Bei Wert value=0 wird das neue, vereinheitliche Konzept für die gegenseitige Kieferausrichtung verwendet.

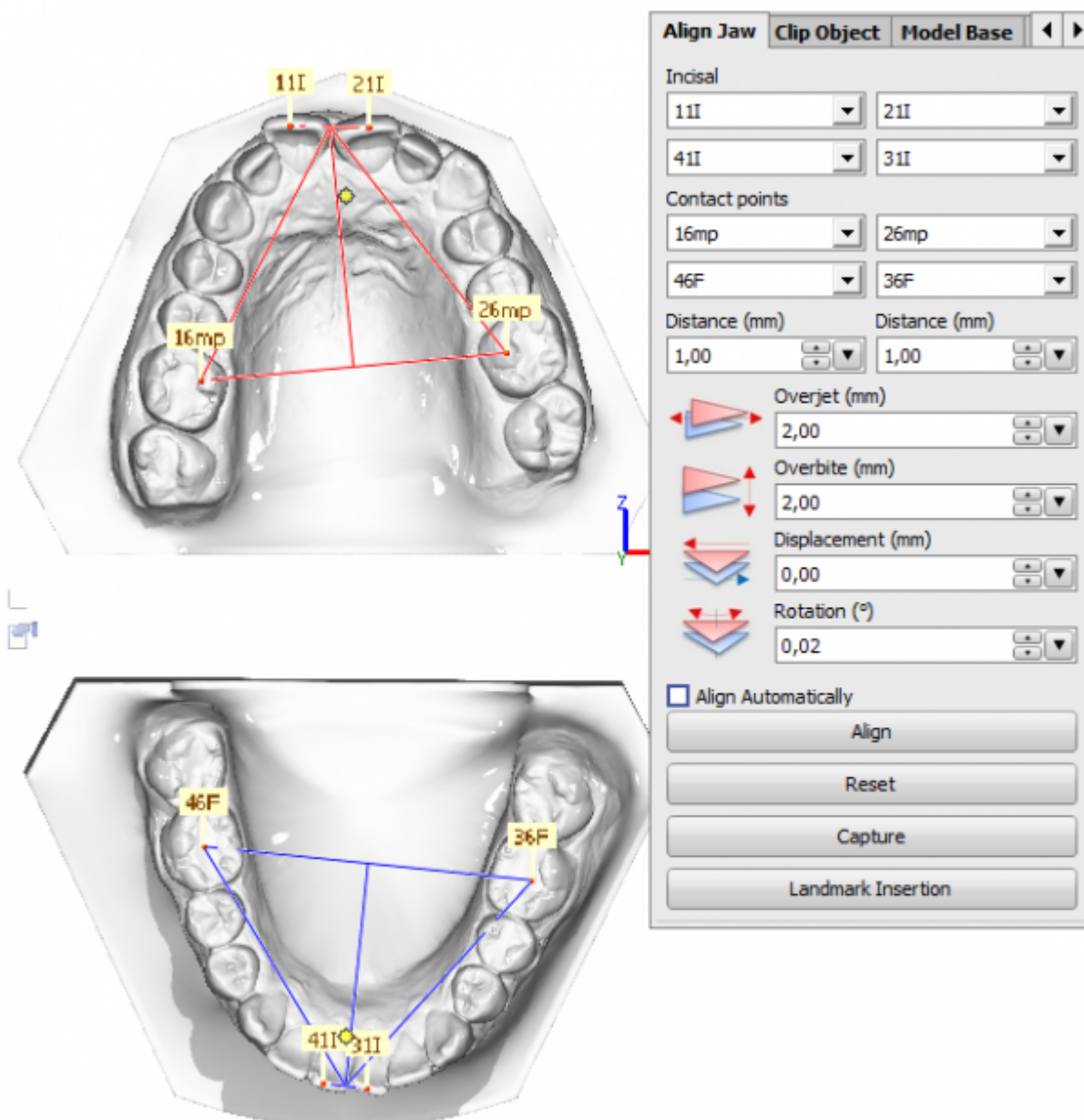

From:

<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

http://onyxwiki.net/doku.php?id=ini_waefer_oldalignjaw

Last update: **2017/08/11 12:45**

