


# Schnittstellenkonfiguration Digitalröntgen: Orex

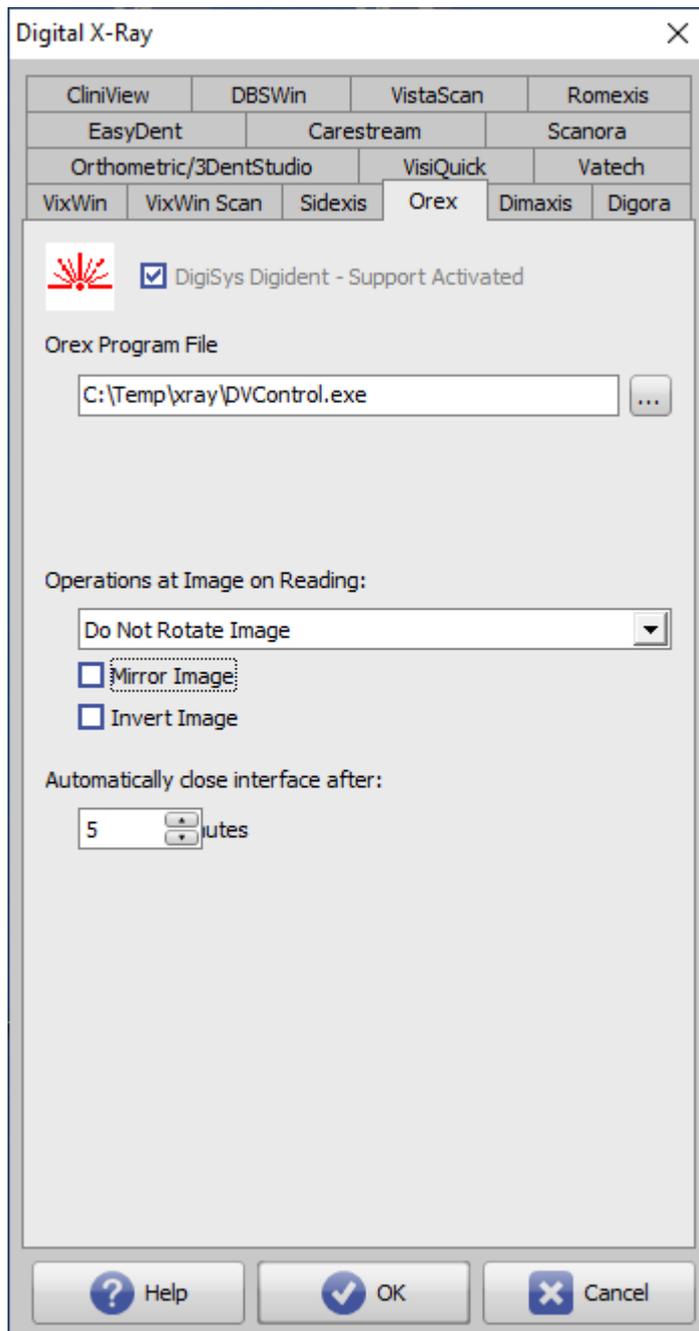

Parameter	Einstellung
[Unterstützung aktiv]	Aktivierung der Importtaste im Modul Bild hinzufügen 2D
Programmdatei [...]	Lokaler Pfad zur ausführbaren Datei ..\DVControl.exe
[Operationen am Bild ...]	Bild bei Übergabe rotieren
[Bei Übergabe vertikal spiegeln]	Bild bei Übergabe vertikal spiegeln
[Bei Übergabe invertieren]	Bild bei Übergabe invertieren
[Interface automatisch schließen ...]	Interface nach 1...10 min automatisch schließen

From:  
<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:  
<http://onyxwiki.net/doku.php?id=orex>

Last update: **2022/06/27 07:38**

