


Schnittstellenkonfiguration Digitalröntgen: Romexis

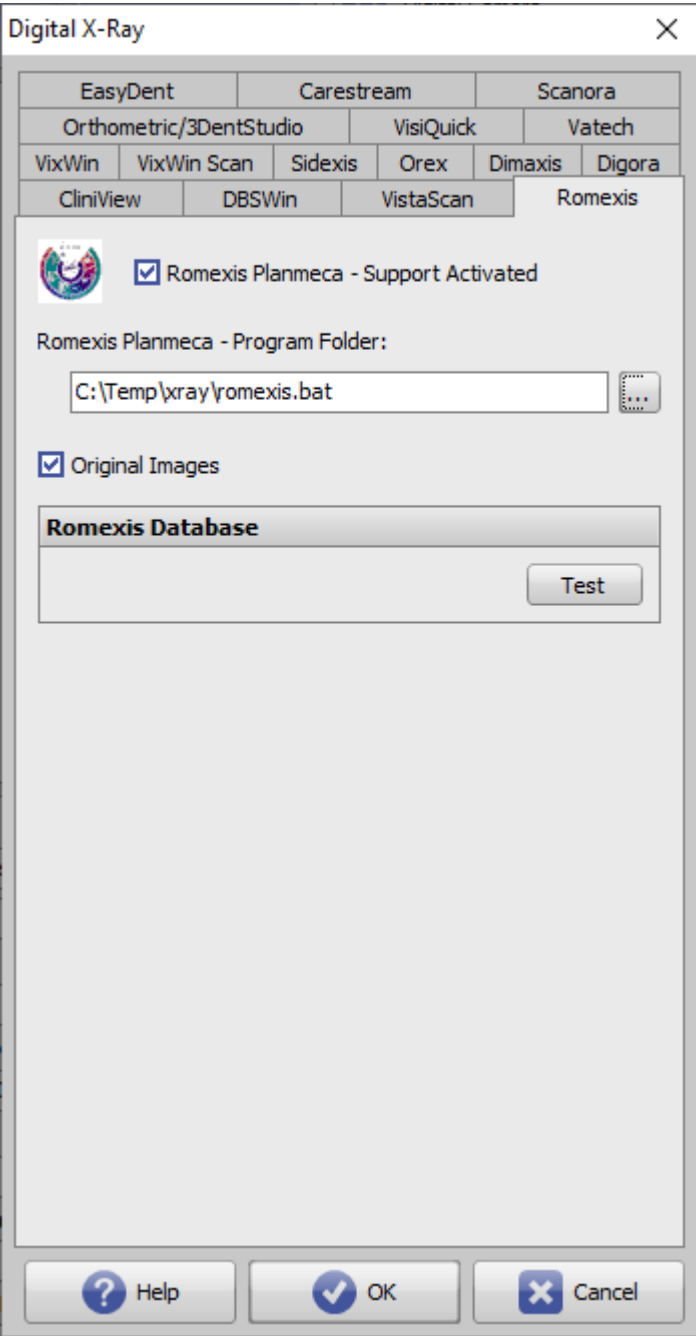

Parameter	Einstellung
[Unterstützung aktiv]	Aktivierung der Importtaste im Modul Bild hinzufügen 2D
Programmpfad [...]	Lokaler Pfad zur ausführbaren Datei ..\Romexis.bat ¹⁾
[Originalbilder]	Original- bzw. bearbeitete Bilder laden
[Test]	Test Datenbankzugriff

Hinweis:
Auf Seiten Romexis muss für die Funktionsfähigkeit der Schnittstelle VDDS aktiviert und gegebenenfalls ein spezieller Kommunikationsport (bitte aus der Romexis-Schnittstellendokumentation übernehmen) freigegeben sein.

Bekannte Probleme

DIDAPI-dll Problem

¹⁾

meist in Unterverzeichnis PMSIF

From:

<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

<http://onyxwiki.net/doku.php?id=romexis>

Last update: **2023/11/30 07:31**

